

CVC E PICC

Cateter Venoso Central e
Cateter Venoso Central de Inserção Periférica




MULTI-CATH

Cateter venoso central para infusão de medicamentos, nutrição parenteral, hemocomponentes e monitorização hemodinâmica de pacientes de alta complexidade.

- ▶ Confeccionado em poliuretano soft;
- ▶ Ponta atraumática;
- ▶ Disponível nos tamanhos pediátrico e adulto.

MULTI-CATH

CÓDIGO	MODELO	MEDIDAS	MATERIAL	CALIBRE
MC2LP-313S	DUPLO LÚMEN PEDIÁTRICO	4 Fr x 13 cm	POLIURETANO SOFT	20/19 Ga
MC2LP-5S	DUPLO LÚMEN PEDIÁTRICO	5 Fr x 13 cm	POLIURETANO SOFT	19/18 Ga
MC3LP-5S	TRIPLO LÚMEN PEDIÁTRICO	5,5 Fr x 13 cm	POLIURETANO SOFT	19/18/19 Ga
MC2L-8S	DUPLO LÚMEN ADULTO	7 Fr x 20 cm	POLIURETANO SOFT	18/14 Ga
MC3L-8S	TRIPLO LÚMEN ADULTO	7 Fr x 20 cm	POLIURETANO SOFT	18/16/18 Ga

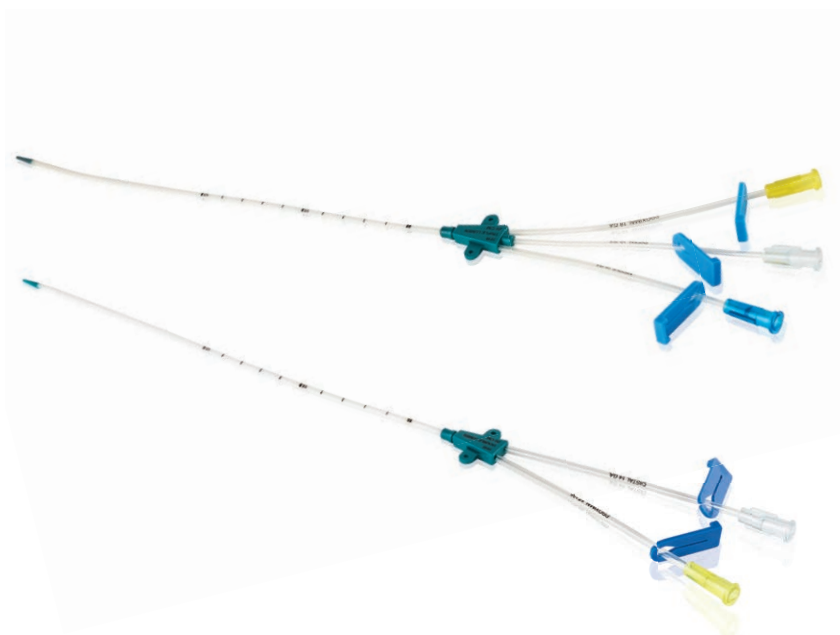

PRO-PICC® CT | Kit Cateter

Cateter central de inserção periférica de alto poder de infusão, confeccionado em poliuretano termossensível. Sua parede fina e resistente proporciona a infusão rápida de medicamentos intravenosos, nutrição parenteral, quimioterápicos e hemoderivados, além da monitorização da pressão venosa central. Permite a injeção de contraste para exames de imagem.

- ▶ Suporta infusão de até 5 ml/s e pressão de 300 psi;
- ▶ Inserção por técnica de micropunção, com agulha de 21 Ga de ponta ecogênica e fio-guia centimetrado.

PRO-PICC® CT

CÓDIGO	MODELO	MEDIDAS	CALIBRE	MATERIAL	LIMITE MÁX. DE PRESSÃO
MR17033101	MONO LÚMEN	3 Fr x 55 cm	19 Ga	POLIURETANO TERMOSENSÍVEL	300 psi
MR17034101	MONO LÚMEN	4 Fr x 55 cm	18 Ga	POLIURETANO TERMOSENSÍVEL	300 psi
MR17035101	MONO LÚMEN	5 Fr x 60 cm	18 Ga	POLIURETANO TERMOSENSÍVEL	300 psi
MR17035201	DUPLO LÚMEN	5 Fr x 55 cm	18/18 Ga	POLIURETANO TERMOSENSÍVEL	300 psi
MR17036201	DUPLO LÚMEN	6 Fr x 60 cm	17/19 Ga	POLIURETANO TERMOSENSÍVEL	300 psi
MR17036301	TRIPLO LÚMEN	6 Fr x 60 cm	19/17/19 Ga	POLIURETANO TERMOSENSÍVEL	300 psi



VASCU-PICC® Neonatal e Pediátrico | Kit Cateter


Cateter venoso central de inserção periférica, confeccionado em poliuretano termossensível, biocompatível e flexível, para terapias de médio a longo prazo.

- ▶ Parede fina e resistente a rompimentos;
- ▶ O kit contém mandril com camada hidrofílica para melhor progressão do cateter.



VASCU-PICC® Neonatal e Pediátrico

CÓDIGO	MODELO	MEDIDAS	CALIBRE	MATERIAL
MR17011101	MONO LÚMEN NEONATAL	1,9 Fr x 50 cm	23 Ga	POLIURETANO TERMOSENSÍVEL
MR17012601	DUPLO LÚMEN PEDIÁTRICO	2,6 Fr x 50 cm	20 Ga	POLIURETANO TERMOSENSÍVEL

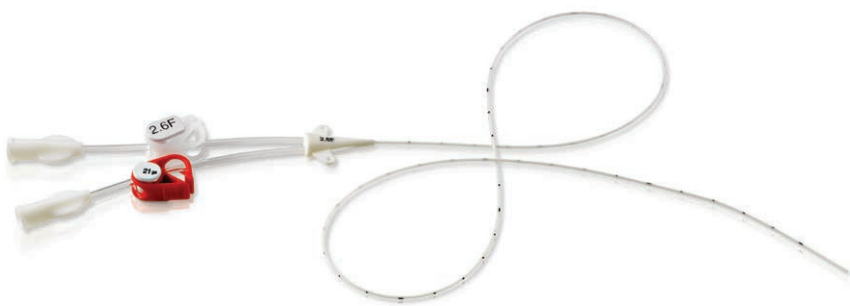

CVC E PICC

Cateter Venoso Central e Cateter Venoso Central de Inserção Periférica




VASCU-PICC® | Kit Cateter

Cateter venoso central de inserção periférica para terapias de médio a longo prazo, confeccionado em poliuretano termossensível.

- ▶ *Inserção por técnica de Seldinger modificada;*
- ▶ *Pode ser utilizado para verificação da pressão venosa central.*

VASCU-PICC®

CÓDIGO	MODELO	MEDIDAS	MATERIAL	CALIBRE
MR17014201	DUPLO LÚMEN PEDIÁTRICO	4 Fr x 60 cm	POLIURETANO SOFT	19 Ga

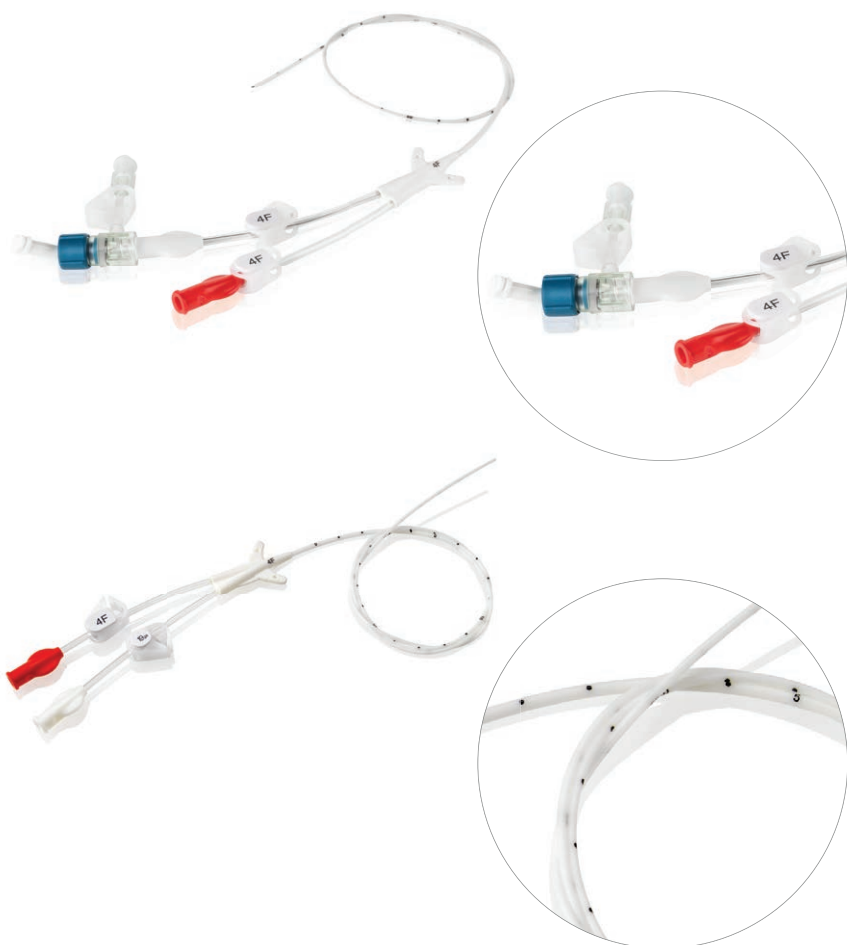

PRO-LINE® CT | Kit Cateter

Cateter venoso central semi-implantável, de longa permanência e alto poder de infusão, confeccionado em poliuretano biocompatível. Sua parede fina e resistente proporciona a infusão rápida de medicamentos intravenosos, hemocomponentes, nutrição parenteral e quimioterápicos.

- ▶ Suporta infusão de até 5 ml/s e pressão de 300 psi;
- ▶ Cuff a 5 cm do hub;
- ▶ Possibilita a inserção por via periférica ou central.

PRO-LINE® CT

CÓDIGO	MODELO	MEDIDAS	MATERIAL	CALIBRE	LIMITE MÁX. DE PRESSÃO
MR28035101	MONO LÚMEN	5 Fr x 60 cm	POLIURETANO TERMOSENSÍVEL	18 Ga	300 psi
MR28036101	MONO LÚMEN	6 Fr x 60 cm	POLIURETANO TERMOSENSÍVEL	14 Ga	300 psi
MR28036201	DUPLO LÚMEN	6 Fr x 60 cm	POLIURETANO TERMOSENSÍVEL	18/18 Ga	300 psi
MR28037201	DUPLO LÚMEN	7 Fr x 60 cm	POLIURETANO TERMOSENSÍVEL	14/14 Ga	300 psi



Micro-Stick® | Kit Introdutor de Micropunção

Agulha de 21 Ga que proporciona uma punção menos traumática, com mais precisão, indicação da posição do bisel e introdutor com ponta ergonômica. Possui fio-guia em nitinol de 0,018" x 45 cm, com ponta atraumática e radiopaca.

Micro-Stick®

CÓDIGO	MODELO	MEDIDAS
MR190421	KIT MICROPUNÇÃO	4 Fr
MR190521	KIT MICROPUNÇÃO	5 Fr



► Introdutor percutâneo

Introdutor percutâneo com ponta ergonômica



► Fio-guia metálico

Fio-guia em nitinol com ponta atraumática



► Agulha de punção

Agulha de punção de 21 Ga

CVC E PICC

Cateter Venoso Central e Cateter Venoso
Central de Inserção Periférica



Escritório

Rua Arminda, 93 – 3º andar
CEP: 04545-100 – Vila Olímpia
São Paulo, SP, Brasil
Tel.: +55 11 3849.8992
E-mail: site@medcorpnet.com.br

Matriz/Centro de Distribuição

Av. Fagundes de Oliveira, 538 – Galpão A5
CEP: 09950-300 – Piraporinha
Diadema, SP, Brasil
Tel.: +55 11 4067.5011
E-mail: site@medcorpnet.com.br

MEDCORPNET.COM.BR



REV. 4

Medcorp Saúde Tecnologia Ltda.

CNPJ: 67.630.541/0001-74

Os direitos sobre o conteúdo deste material são de titularidade exclusiva da Medcorp Saúde Tecnologia Ltda., a quem cabe, unicamente, o direito de usar, fruir e dispor de sua obra, sendo vedada a reprodução e/ou utilização, divulgação, publicação ou compartilhamento total ou parcial deste documento por terceiros, por qualquer forma, sem prévia autorização escrita da autora, nos termos da Lei 9.610/98, sob pena de aplicação das medidas judiciais cabíveis.